



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
7 (495) 230-60-83
DO.ML 204T

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Пр

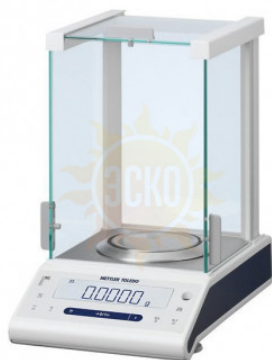

Описание METTLER TOLEDO ML 204T

ЭКОНОМИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

Продуманная эргономичная конструкция, возможность питания от батареек, точность и надежность. Это самые компактные весы в своем классе!

ОЦЕНИТЕ НОВУЮ МОДЕЛЬ ВЕСОВ ML-T

Надежная весовая ячейка, функции защиты настроек и инструкции для оператора обеспечивают высокое качество результатов.

- Простота эксплуатации
- Компактность и удобство
- Достоверные результаты

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Цветным сенсорным дисплеем TFT 4,5 дюйма можно пользоваться, не снимая тканевых или резиновых перчаток. Интуитивно понятный интерфейс пользователя с крупными цифрами упрощает ежедневную работу.

ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ ВЫРАВНИВАНИЯ

Встроенная функция LevelControl предупреждает оператора об отклонении от горизонтального положения и выводит инструкции, с помощью которых весы быстро выставляются по уровню.

НАДЕЖНАЯ ВЕСОВАЯ ЯЧЕЙКА ГАРАНТИРУЕТ ДОСТОВЕРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Весовая ячейка MonoBloc с функцией автоматической калибровки FACT обеспечивает достоверность результатов. Защита весовой ячейки от перегрузок гарантирует длительный срок службы весов.

СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ С MINWEIGH

Цифры на дисплее остаются красными до тех пор, пока вес образца не достигнет установленной величины. Эту величину определяет пользователь. Для дополнительной надежности можно установить коэффициент охвата ($K=2$).

БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ ОЧИСТКА

Ветрозащитный кожух QuickLock снимается за несколько секунд без применения инструментов, а все детали можно мыть в посудомоечной машине. Гладкие, скругленные поверхности легко и качественно очищаются.

ПРОСТОТА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Неограниченные возможности передачи данных благодаря двум интерфейсам USB, RS232 и Bluetooth (дополнительно). Встроенная функция PC Direct упрощает перенос данных на ПК без установки дополнительного программного обеспечения.

Характеристики METTLER TOLEDO ML 204T

Технические характеристики METTLER TOLEDO ML 204T	
НПВ	220 g
Дискретность	0,1 mg
Воспроизводимость	0,1 mg
Типичный минимальный вес (USP)	160 mg
Время стабилизации	2 s

