




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Адрес: Москва, ул. Гиляровского, дом 51
+7 (495) 258-80-83
Бесплатный звонок
8 800 950-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

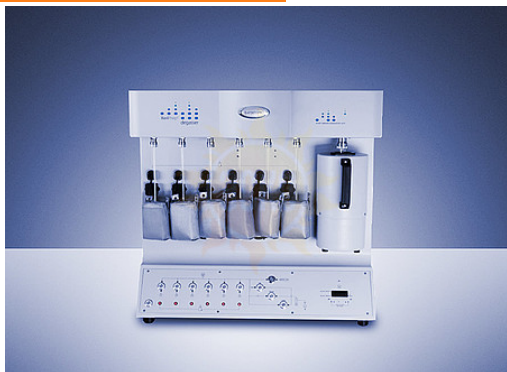

Яч
об

Ме
де

Хо
ло

Ма
те

Ко
те

Ск
оп

Ва
на

Ту

Ве

Ра

Описание Дегазатор Anton Paar XeriPrep Degasser

Дегазатор Anton Paar XeriPrep Degasser. Дегазатор для исследований и разработок, в коммерческих и многопользовательских лабораториях, где требуется гибкость в подготовке образцов для удовлетворения высокопроизводительных рабочих процессов с различными типами проб.

Каждый из шести портов дегазации имеет независимую температурную зону, контролируемую с помощью прилагаемого программного обеспечения для ПК PrepWin, что позволяет автоматически программировать до 20 ступеней нагрева и замачивания. Это позволяет легко удовлетворить особые потребности в подготовке высокочувствительных к температуре образцов. Встроенная холодная ловушка и дополнительный турбо-вакуумный насос максимизируют производительность вакуума и обеспечивают быструю и полную пробоподготовку всех типов материалов.

Особенности и преимущества

- Напитки
- Химическая индустрия
- Косметика/гигиена
- Образование/исследования
- Пищевая индустрия
- Наука о материалах/нанотехнологии
- Минералы/добыча/сырьё
- Фармацевтическая индустрия/медицина/биотехнология

Характеристики Дегазатор Anton Paar XeriPrep Degasser

Параметр	Значение
Ячейки для образцов	6 (с возможностью расширения до 12)
Метод дегазации	Вакуумный
Холодная ловушка	Да
Макс. температура	350 °C (стандарт), 450 °C (опционально)
Контроль температуры	Да (с помощью ПО)
Скорость опустошения	Быстрая, средняя и низкая
Габариты	74 x 77 x 40 см
Вес	72 кг
Вакуумный насос	Включен
Турбонасос	Опционально

Комплектация Дегазатор Anton Paar XeriPrep Degasser

- Дегазатор
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

